




1.16 日常分析の 典型的な ワークフロー


標準取扱説明時間 : 0:10:00
ビデオ概算時間 : 0:05:00

[ビデオを再生する](#)


Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
71

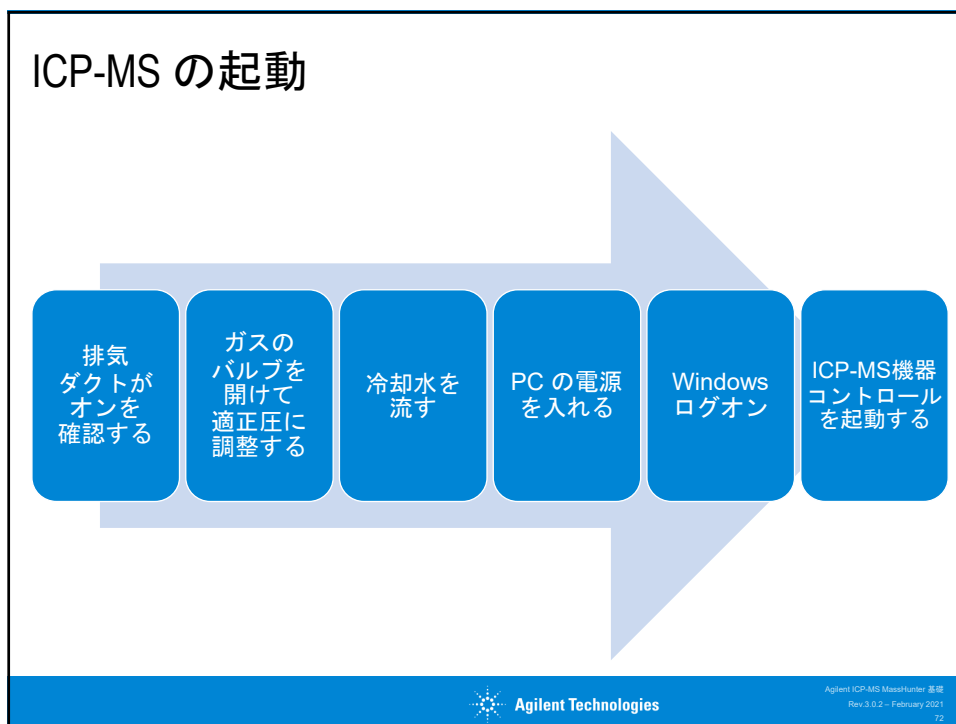

プラズマ点火

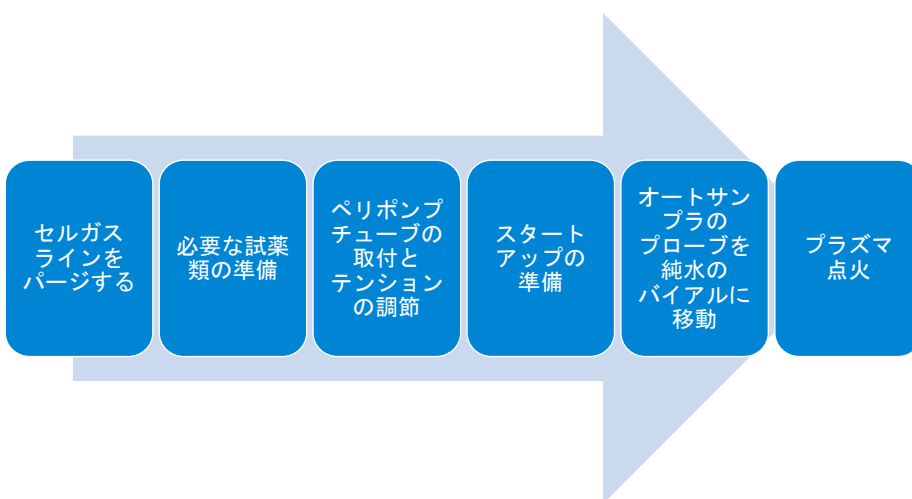

バッチの分析

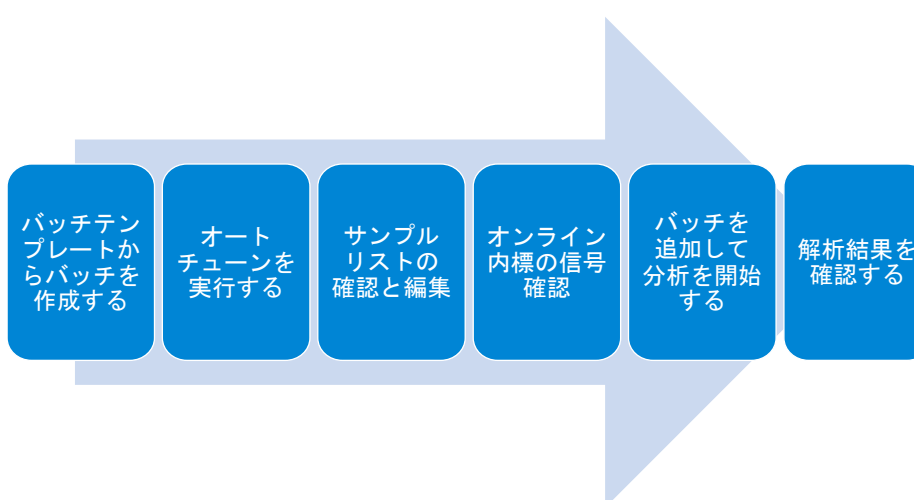

プラズマ消火とスタンバイ

プラズマを
消火して
スタンバイ
になること
を確認する

ペリポンプ
チューブを
外す

ガスの
バルブを
閉じる

冷却水を
止める

MassHunter
を終了する

PCの電源を
オフにする