



1.1 MassHunter 的 概要

标准操作说明时间: 0:10:00
视频估算时间: 0:08:00

[播放视频](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
4

Agilent 7900 的标准配置和选项

选项 101 UHMI	选项 102 高级采集功能	功能	典型应用领域
X		Ultra HMI (UHMI)	环境
X		方法自动化	常规
	X	TRA 数据采集、快速 TRA	形态分析
	X	时间分辨谱图数据分析	研究、学术
	X	半质量、窄峰	研究、学术
	X	同位素比率、同位素稀释分析	研究、学术
	X	等离子点火有机溶剂模式	有机溶剂
	X	支持可选气体管线 (20% O ₂ /Ar)	有机溶剂
	X	支持将激光烧蚀用作样品引入	激光烧蚀
	X	支持第三种碰撞池气体管线	研究、学术



Agilent 7800 的标准配置和选项

功能	典型应用领域
TRA 数据采集	形态分析
时间分辨谱图数据分析	研究、学术
半质量、窄峰	研究、学术
同位素比率、同位素稀释分析	研究、学术
等离子点火有机溶剂模式	有机溶剂
支持可选气体管线 (20% O ₂ /Ar)	有机溶剂
支持将激光烧蚀用作样品引入	激光烧蚀
支持第三种碰撞池气体管线	研究、学术

开始 MassHunter

[ICP-MS 仪器控制]


- [ICP-MS MassHunter Workstation] > [ICP-MS 仪器控制]

[脱机数据分析]


- [ICP-MS MassHunter Workstation] > [脱机数据分析]

或从桌面图标启动

欢迎画面的操作

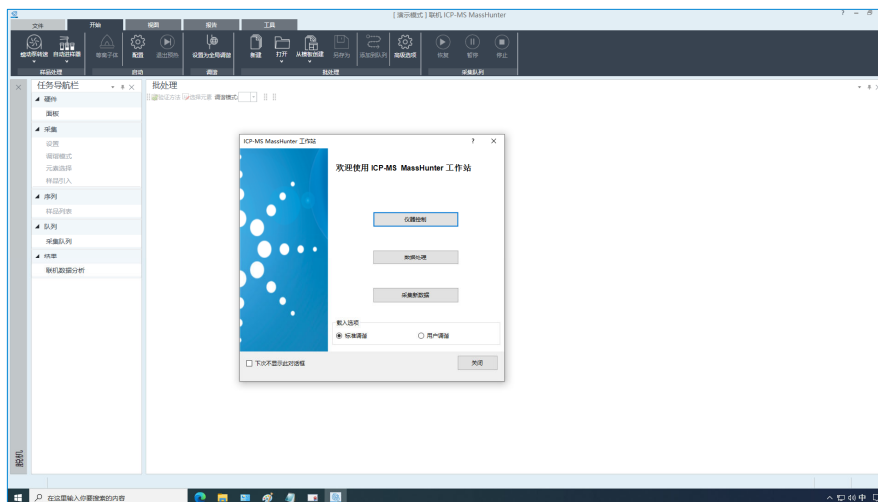

功能区和任务导航栏

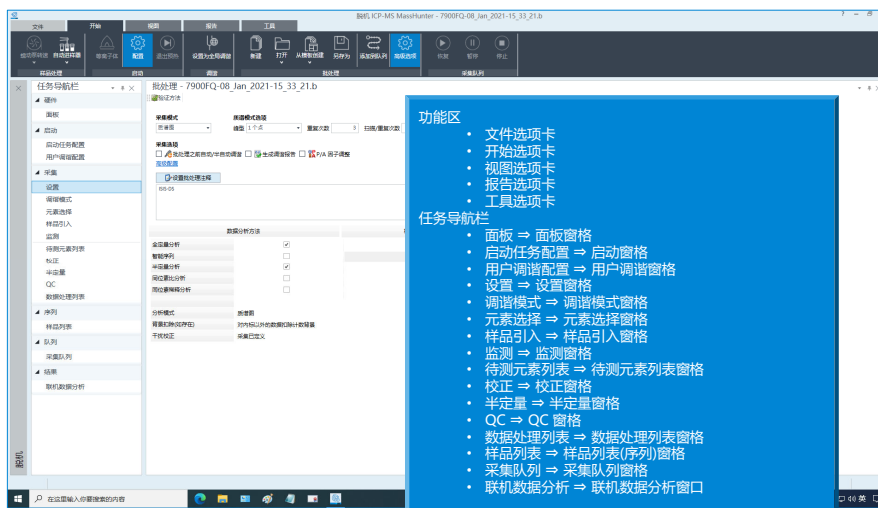

使用自动进样器

